


# Das Handstück zur Karieserkennung

**lares**<sup>®</sup>  
RESEARCH  
60 Years of Quality

**NEU!**

## FLUORESCENCE™ HD

- Kariöse Stellen fluoreszieren bei der Kariesentfernung unter 405 nm (UV) LED-Licht orange/rot während gesundes Gewebe hellgrün angezeigt wird.
- Der Zahnarzt entfernt nur orange/roten Karies und minimiert so die Entfernung von gesunder Zahnschubstanz (minimal invasiv).
- Deutlich verkürzte Stuhlzeit: Nach der Entfernung des betroffenen Gewebes ist die Behandlung komplett ohne die Instrumente wechseln zu müssen.
- Die F.A.C.E. (Fluoreszenz-unterstützte Kariesabtragung) Technologie ist gründlicher bei der Identifizierung von Kariesrückständen als alternative Methoden und minimiert so das Risiko des Neubefalls.
- Fluoreszierendes Licht akzentuiert deutlich die visuellen Unterschiede zwischen Zahn- und Restaurationsmaterialien (z.B. Harze, Zemente usw.), was die Beseitigung von gesundem Zahngewebe minimiert und die Stuhlzeit verkürzt.

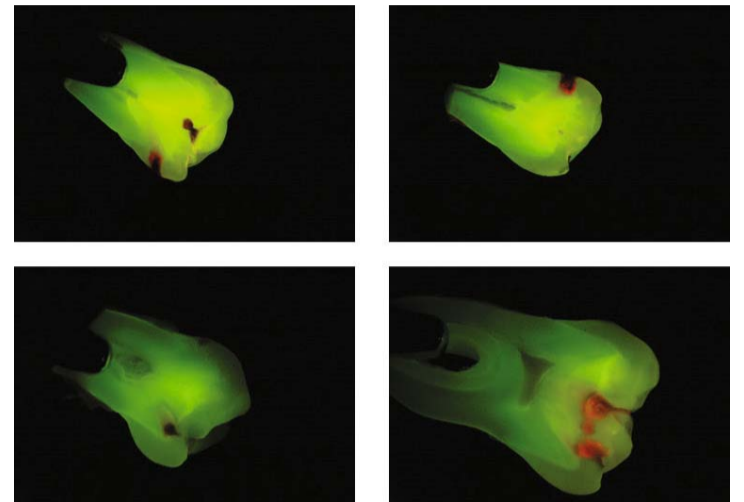

Fluoresce HD ermöglicht eine klare visuelle Differenzierung von verbleibendem Karies- und gesundem Gewebe.



**NEU!**

## LEGACY 5 TURBINEN: MIT BAHNBRECHENDER 5-JAHRES GARANTIE



**Legacy 5**  
Standard-  
Kopf mit  
4 Port Spray

### LEGACY 5 Hochgeschwindigkeitsturbinen haben die Features, die man braucht

- außergewöhnliche Schneidleistung (Standard: 20 W, Mini: 18 W)
- flüsterleiser Betrieb dank DynamicPrecision™ (Standardkopf 59,9 dBA)
- SteelGrip™ Druckknopf-Spannsystem für langlebige Bohrleistung und Schneidgenauigkeit
- solide Stablinsenoptik für helle, langlebige Beleuchtung (optional)
- kompatibel mit KaVo MULTiflex\* 360° Drehgelenk; schnell wieder trennbar
- rutschfester TactilSense™ Edelstahlgriff
- langlebige Präzisions-Keramiklager



**Legacy 5 Mini-Kopf**  
für hervorragende Sicht  
und Zugänglichkeit

**Besuchen Sie uns in Halle 5 | Stand F05**

## INTERNATIONALE VERTRIEBSPARTNER GESUCHT

Kontakt: Christian Godoy: [cgodoy@laresdental.com](mailto:cgodoy@laresdental.com)

Mobil: 1-530-717-3145 [www.laresdental.com](http://www.laresdental.com)

\*KaVo und MULTiflex sind registrierte Warenmarken der KaVo Dental GmbH